

# Como lavar correctamente su inhalocamara<sup>1</sup>



Paso 1




Desarme la inhalocamara en las tres partes, como se indica en la foto.

Paso 2



En un recipiente mezcle, 1 litro de agua (fría o tibia) más 2 medidas de jabón líquido para lavar loza. No use agua caliente.

Paso 3

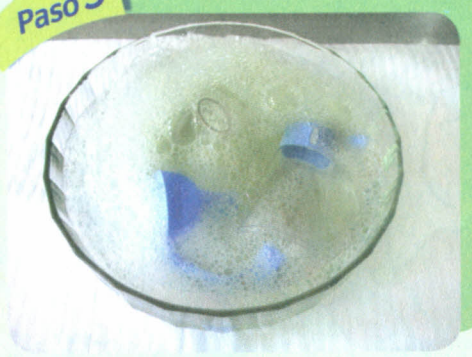

Sumerja las partes y asegure que queden cubiertas por el agua jabonosa. Agite suavemente dentro del agua estas partes. Deje reposar por 15 a 20 minutos.

Paso 4



Enjuague solamente la boquilla y la mascarilla con abundante agua fría o tibia. No enjuague el cilindro de la inhalocamara.

Paso 5



Deje secar las partes al medio ambiente en posición vertical. Absténgase de secar con papel, toallas o paños de tela.

Paso 6



Ensamble nuevamente su inhalocamara, quedando lista para usar.

## Recuerde

- ✓ Lave, antes de usar la primera vez.
- ✓ Para lograr un buen funcionamiento de la inhalocamara, evite lavar con blanqueador o alcohol.
- ✓ Lave su inhalocamara por lo menos 1 vez al mes. Sin embargo es preferible lavarla cada 15 días
- ✓ Evite dejar la inhalocamara a exposición del sol.
- ✓ Si usted observa opacidades que no desaparezcan con el lavado, fisuras o daños en su inhalocamara, considere cambiarla.
- ✓ Ante cualquier duda, consulte con su médico.

Se recomienda usar la inhalocamara con mascarilla en niños entre los 0 a 2 – 3 años y con boquilla en mayores de 3 años.<sup>2</sup>